


Термоманометрическая лампа ЛТ-4М

Ток нагревателя

Дата испытания

Контролер ОТК

110 - 140 ма
3/VI 1958
Мурин

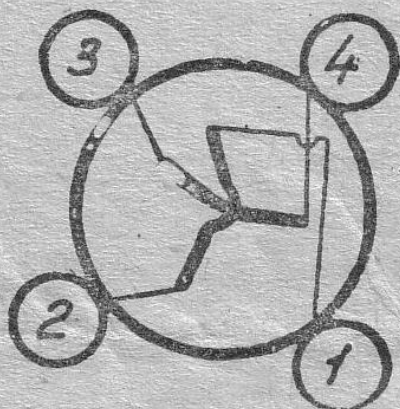

1. Термопара (+)
2. Накал
3. Термопара (-)
4. Накал

Указания по эксплуатации:

1. Величина тока нагревателя, указанная на колбе манометра, является ориентировочной и уточняется потребителем применительно к действующей вакуумной установке.
2. Корректировка тока нагревателя должна производиться не реже одного раза в месяц при давлении $1 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.; при указанном давлении необходимо прогреть нагреватель в течение 2-5 минут током удвоенной величины, затем через 10-15 минут произвести градуировку манометра, т.е. установить, при каком токе нагревателя термопара разовьет ЭДС, равную 10 мВ.
3. Корректировка тока нагревателя манометра должна производиться с вакууметром той же марки, с которым манометр эксплуатируется.
4. Не допускается включение манометра при давлении более 0,5 мм рт. ст.

Градуировочная кривая лампы типа ЛТ-4М

